



Diseño y eficacia en aerosolterapia

InnoSpire Elegance, sistema de nebulización de Philips Respironics

Diseño robusto

InnoSpire Elegance está específicamente diseñado para proporcionar una eficacia y fiabilidad en los tratamientos que requieran utilización frecuente. Como parte de nuestra familia de sistemas de nebulización InnoSpire, el modelo Elegance proporciona un funcionamiento continuo, idóneo para su uso tanto en hospital, como en el domicilio.

Alta tecnología en nebulización

InnoSpire Elegance incorpora nuestra tecnología SideStream, el nebulizador reutilizable de Philips Respironics, que ofrece alta precisión en la producción de aerosol, eficacia y calidad en los tratamientos. Puede estar seguro de que los pacientes seguirán recibiendo un aerosol de alta calidad durante los doce meses de vida útil del nebulizador.

Principales características

- Tecnología SideStream clínicamente testada
- Tiempos de tratamiento más rápidos (6-8 minutos*)
- Recomendado para el uso continuo, tanto en hospital como en el domicilio


PHILIPS
RESPIRONICS

Total fiabilidad en la administración de aerosol

El nebulizador SideStream ha sido diseñado para que el aire aspirado por el venturi del nebulizador mejore el flujo de salida del aerosol producido. El resultado es un menor volumen residual, tratamientos más rápidos, y una calidad de aerosol más consistente. Además, cuenta con un exclusivo diseño de jet que minimiza el desgaste por uso frecuente y que facilita la generación de partículas de aerosol ideales para ser inhaladas.



El efecto venturi permite que 6 litros de flujo producidos por el compresor se conviertan en 16 litros de salida (8 litros nos da 22 de salida)

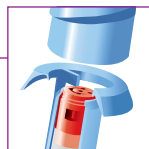

Innovador diseño de salida de jet para un aerosol constante y de máxima calidad

Datos de rendimiento

MMAD	2,9 µm
Porcentaje de partículas inhalables	77 % por debajo de 5 µm
Tiempo de tratamiento (volumen de 2,5 ml)	6-8 minutos

Descripción del producto (con voltaje/frecuencia) N° de ref.

Elegance 230 V/50 Hz enchufe UE	1099973
Elegance 230 V/50 Hz enchufe UK	1099971
Elegance 230 V/50 Hz enchufe australiano	1099970
Elegance 220 V/60 Hz enchufe UK	1100309
Elegance 220 V/60 Hz enchufe coreano	1102460
Paquete SideStream reutilizable anual	2010A
Kit SideStream reutilizable con mascarilla para adultos	1223A
Kit SideStream reutilizable con mascarilla pediátrica	1224A
Kit SideStream reutilizable con boquilla	1225A
Filtros de entrada de aire (paquete de 4)	1102088

Especificaciones técnicas

Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz, 1 Amp	220 V/60 Hz, 1,2 Amp
Máx. presión de compresor	317 kPa (46 psi)	296 kPa (43 psi)
Velocidad media de caudal	6 lpm @ 10 psig	7 lpm @ 10 psig
Velocidad máx. de caudal	8,0 lpm	9,3 lpm
Protector de sobrecarga	Fusible térmico, temperatura de funcionamiento 150 °C	
Peso	1,5 kg	
Dimensiones (l x an x al):	165 x 165 x 108 mm	
Nivel de ruido	58 ±3 dBA	

*Datos en archivo de Philips Respironics

Respironics, InnoSpire, Elegance y SideStream son marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics N.V. y empresas afiliadas, todos los derechos reservados.

Para más información, visite www.philips.com/innospire



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o de dejar de fabricar cualquier producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligaciones y no se considera responsable de las consecuencias derivadas de la utilización de esta publicación.

BROUDY AE XX/XX/XX MCI 4105452 PN 1106388

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Philips Respironics Sede Internacional
+33 1 47 28 30 82
Philips Respironics Asia Pacifico
+65 6882 5282
Philips Respironics Australia
+61 (2) 9947 0440
1300 766 488 (toll free, Australia only)
Philips Respironics UK
+44 800 1300 845

Respironics New Jersey, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054 EE. UU.

Atención al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics